

EQUIPO TRANSFERIDOR SISTEMA FECHADO**ANVISA Nº: 80163570027****1 – Introdução**

Produto para transferir e misturar soluções parenterais em sistema fechado.

2 – Aplicação

Dispositivo de uso médico-hospitalar, destinado a transferência, mistura e ou reconstituição de soluções entre frascos/bolsas através de sistema fechado, sem que as soluções tenham contato com o ambiente.

3 – Composição

Ponta perfurante trifacetada, confeccionada conforme dimensões descritas na NBR ISO 8536-4 2011, adaptável em bolsa e frascos de soluções, material em ABS;

Protetor da ponta perfurante (tampa) confeccionado em material PEBD (Polietileno de Baixa Densidade);

Produto Livre de Látex – FREE LATEX**4 – Modelos**

Equipo Transferidor Sistema Fechado

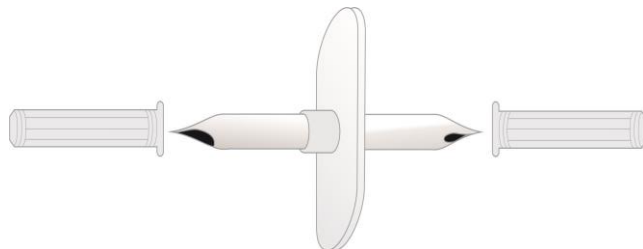
5 – Apresentação Comercial

Embalagem Primária: Plástico Filme + Papel Grau cirúrgico;

Embalagem Secundária: caixa de papelão.

6 – Advertência

- Produto de uso único.
- Descartar imediatamente após o uso.
- Proibido reprocessar

7 – Imagem do Produto**8 – Rotulagem e Embalagem**

COD: 10312551 – EQUIPO TRANSFERIDOR
SISTEMA FECHADO
LOTE. OP: 00000 FAB/ESTERIL: 00/00/00
ANVISA 80163570027

**8 – Esterilização**

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

9 – Validade

Após a data de fabricação 4 anos.

10 – Responsável Técnico

Regiane Gavlak

CRQ/PR Nº: 09201294

Controle das Alterações:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
06/2021	04	Rogério S. Soares	Atualização do modelo, alteração do nome do produto.