

Revisão N°05

FICHA TÉCNICA FT 8.004

Emissão 09/2022



SONDA NASOGÁSTRICA ANVISA N°80163570003

FINALIDADE:

É introduzida através da boca ou nariz até o estômago ou intestino, quando por alguma razão o paciente não pode utilizar a boca no processo digestivo, usada para administrar medicamentos e alimentos

diretamente no trato gastrointestinal; e para fazer lavagens gástricos. As sondas nasogástricas curtas são as sondas introduzidas até o estômago, e as nasogástricas longas são introduzidas até o trato intestinal. São conectadas a um equipo de nutrição, o qual é conectado ao frasco de alimentação ou as sondas podem ser conectadas a uma seringa.

COMPOSIÇÃO:

- 1. Área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor.
- 2. Tampa flexível, possibilitando a vedação da sonda.
- 3. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas para facilitar à aplicação, tendo seu comprimento de 40 cm as curtas e de 110 as longas. Os calibres, de 04 ao 24 FR (Curta) e de 04 ao 24 FR (Longa).
- 4. Dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda.
- 5. Possui a extremidade proximal arredondada, fechada nas curtas e aberta nas longas, isenta de rebarbas.
- 6. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rótulo



COD: 10103180 – SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08

LOTE.OP: 00000 FAB/ ESTERIL: 00/00/00 ANVISA N° 80163570003

7 898487 860285

EMBALAGEM:


Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

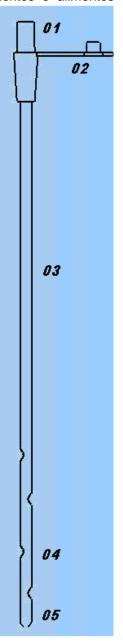



Revisão N°05

FICHA TÉCNICA FT 8.004

Emissão 09/2022



CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

0011111022 D710 7121 2117 1 9 0 2 0 1			
Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	03	Milena Costa Rivera	"Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de 'Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".
09/2022	05	Gessica Dias Correia	Alteração do Item 3 da COMPOSIÇÃO.