

CATETER PARA OXIGÊNIO
ANVISA Nº80163570002**FINALIDADE:**

O cateter nasal é utilizado para administrar oxigênio ao paciente que requer concentrações de oxigênio de baixas a moderadas.

- A) Cateter nasal neonatal: calibre 6FR.
- B) Cateter nasal infantil: calibre 10FR.
- C) Cateter nasal: calibres do 04 ao 20 FR.

COMPOSIÇÃO:

1. Conector Universal em PVC, para conectar ao extensor do umidificador, previamente instalado na saída da rede de oxigênio ou cilindro. Calibres: **04 ao 20 FR.**
2. Tampa acoplada ao conector, somente no cateter nasal.
3. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação. Comprimento de:
90 cm para cateter nasal neonatal e infantil.
40 cm para cateter de oxigênio.
4. Dotada de quatro orifícios laterais. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada cateter. Esse tipo de cateter é introduzido na narina do paciente.
5. Cateter neonatal e infantil possuem dois orifícios do mesmo lado, para posicionar próxima a narina do paciente.
6. Sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas.
7. FREE LÁTEX

EMBALAGEM:

MEDSONDA
PRODUTOS PARA SAÚDE


DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, APIROGÊNICO, USAR CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA, DESTRUIR APÓS O USO, PRODUTO DE USO ÚNICO.

PROIBIDO REPROCESSAR

CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE USO PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES.
WWW.MEDSONDA.COM.BR OU SOLICITE PELO
SAC TEL: (43) 3512 2800 OU E-MAIL: SAC@MEDSONDA.COM.BR

RESPONSÁVEL TÉCNICO REGIANE GAVLAK CRQ/PR 09201294 VALIDADE: 4 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO	ADVERTÊNCIAS UTILIZAR APENAS SE A EMBALAGEM ESTIVER ÍNTEGRA E NO PRAZO DE VALIDADE.
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

CONTÉM 1 (UMA) UNIDADE
FABRICANTE/DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO: MEDSONDA IND. E COM DE PROD. HOSPITALARES DESC. LTDA
AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, 1191 - DIST. IND. | CNPJ: 05.150.338/0001-43
ARAPOTI-PR | CEP: 84990-000 | FONE: (43) 3512 2800 | E-MAIL: MEDSONDA@MEDSONDA.COM.BR
INDÚSTRIA BRASILEIRA

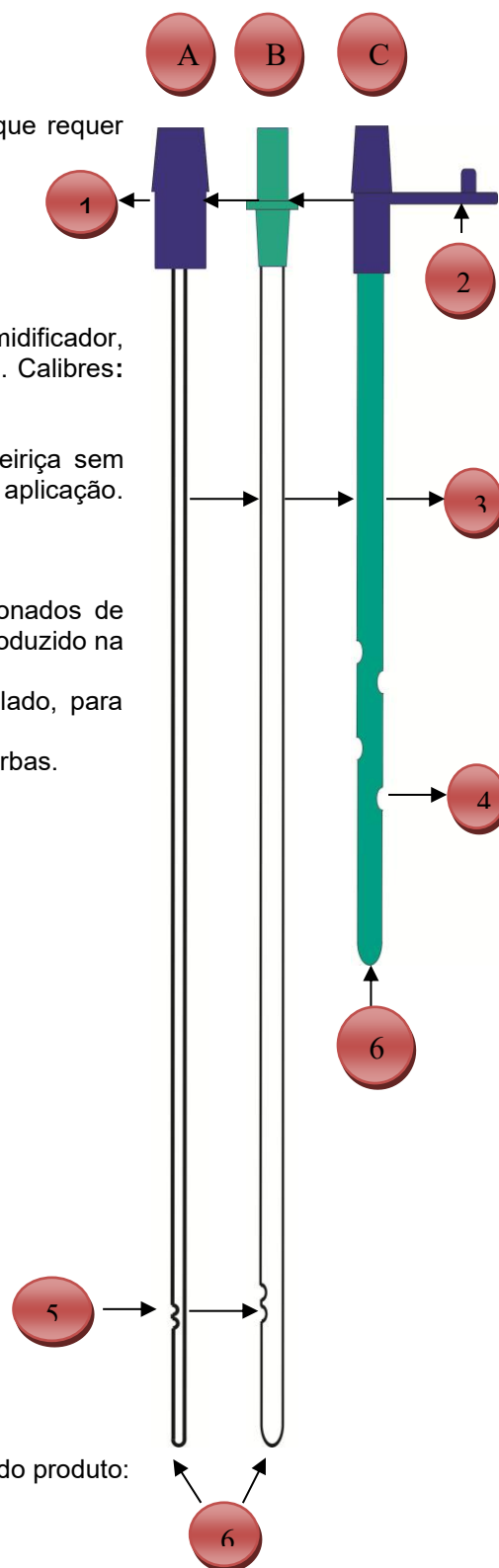

Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:

- Código ;
- Descrição do produto;
- Lote;
- Data de fabricação.
- Cadastro ANVISA;
- Instrução de Uso e Revisão;
- Código de barras.

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	03	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".
04/2025	05	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade "Gessica Dias Correia" para "Rozilda R. Oliveira". Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.