

**10312102 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PARTÍCULAS,  
CON. LUER SLIP  
ANVISA Nº80163570006**

**FINALIDADE:**

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalp que se adaptem em conectores padrão 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.

**COMPOSIÇÃO:**

1. Protetor para ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR 8536-4:2011 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada, com filtro particulado de 15 micras.
4. Tubo em PVC atóxico com 150 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
5. Pinça com rolete para a regulação do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulação.
6. Conector luer slip conforme NBR ISO 594-1 e 2 :2003 montagem cônica com conicidade de 6% (luer) para seringas e agulhas.
7. Protetor para conector luer slip.
8. FREE LÁTEX

**ROTULAGEM: Modelo de Rótulo**

| EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA.<br/>AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, Nº 1191   DISTRITO INDUSTRIAL   ARAPOTI - PR   CEP: 84.990-000   IE: 9026874405<br/>FONE: 43 3512 2800   sac@medsonda.com.br</p> <p>RESP. TÉCNICA: REGIANE GAVLAK   CRO - PR 09201294   www.medsonda.com.br</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</b></p> <p>- PRODUTO COMPOSTO DE PVC - INCLUI PROTETOR DE VÍDEO<br/>- COMPRIMENTO MÍNIMO 1.500MM<br/>- LUMES DE PRODUÇÃO E TORÇÃO<br/>- ATÓXICO<br/>- FABRICADO CONFORME ABNT NBR 8536-4:2011<br/>- 20 GOTAS DE ÁGUA DESTILADA LIBERADAS PELO GOTEJADOR SÃO EQUIVALENTES A UM VOLUME DE 1ML OU MASSA DE 100µg</p> <p><b>ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES</b></p> <p>- UTILIZAR SOMENTE SE A EMBALAGEM ESTIVER INTEGRAL E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.<br/>- UTILIZAR SOMENTE SE TODOS OS COMPONENTES ESTIVEREM INTEGRALMENTE CONSTITUÍDOS.<br/>- PRODUTO DESCARTÁVEL, DE REPROCESSAMENTO PROIBIDO, USO ÚNICO.<br/>- EQUIPOS PRODUZIDOS EM PVC COM DOPNÃO DEVEM SER UTILIZADOS COM MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM EM SUA COMPOSIÇÃO DOPNÃO.</p> <p><b>CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO</b></p> <p>MANTER EM LOCAL SECO, LIMPO E TEMPERATURA AMBIENTE.</p> | <p><b>INSTRUÇÕES DE USO</b></p> <p>1 - ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR<br/>2 - FINALIDADE: ADMINISTRAR SOLUÇÕES PARENTERAIS POR INFUSÃO GRAVITACIONAL<br/>3 - COMPATÍVEL COM CONEXÕES LUER, CONICIDADE 6%<br/>4 - ABIR A EMBALAGEM DE FORMA ASSÉPTICA<br/>5 - FECHAR O REGULADOR DE FLUXO<br/>6 - INSERIR A TAMPA PROTETORA DA PONTA PERFURANTE E CONECTAR AO FRASCO DE SOLUÇÃO<br/>7 - MODOS COM INJETOR LATERAL PODE SER UTILIZADO PARA INTRODUIR MEDICAÇÃO<br/>8 - REGULAR O FLUXO PRESCRITO, INICIANDO O GOTEJAMENTO DE SOLUÇÃO</p> <p><b>VER INSTRUÇÕES DE USO</b></p> <p>www.medsonda.com.br</p> |
| <p><b>MODELOS COMERCIALIZADOS</b></p> <p>10312102 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER ROTATIVO<br/>10312103 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP<br/>10312104 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP<br/>10312105 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP<br/>10312106 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP<br/>10312107 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP<br/>10312108 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP</p>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Saúde</b></p> <p>Computatório</p> <p>USO ÚNICO<br/>NÃO REESTERILIZAR<br/>PROIBIDO REPROCESSAR</p> <p><b>STERILE</b></p> <p><b>MEDSONDA</b><br/>PRODUTOS PARA SAÚDE</p> <p>Validade 4 anos após a data de fabricação</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**COD: 10312102 – EQUIPO MACRO FLEX. FILTRO  
PART. CONEC. LUER SLIP  
LOTE.OP: 00000 FAB/ ESTERIL: 00/00/00  
ANVISA Nº 80163570006**



**EMBALAGEM:**


Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

**ESTERILIZAÇÃO:**

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

**VALIDADE:**

Validade 4 anos.

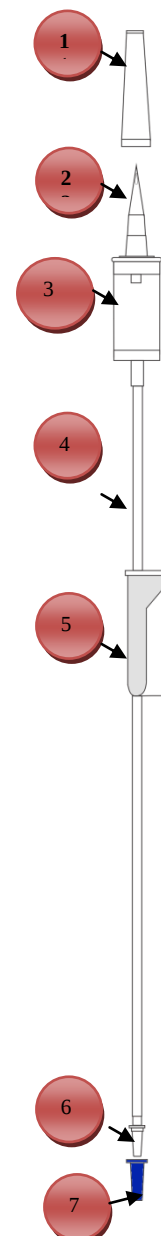

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:**

| Data    | Revisão | Responsável          | Alterações                                                                                                                       |
|---------|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/2018 | 03      | Joelma C. Brizola    | Inclusão free látex                                                                                                              |
| 10/2019 | 04      | Milena Costa Rivera  | Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.                           |
| 02/2022 | 05      | Gessica Dias Correia | Atualização do selo NCC.<br>Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Gessica Dias Correia”. |