

	Revisão Nº05	FICHA TÉCNICA FT 8.046	Emissão 02/2022	
---	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---

**10312202 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PARTÍCULAS, INJ. LAT,
CON.LUER SLIP
ANVISA Nº80163570006**


FINALIDADE:

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalpels que se adaptem em conectores padrão 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR 14041/96 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada, com filtro particulado de 15 micras.
4. Tubo em PVC atóxico com 130 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
5. Pinça com rolete para a regulagem do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulagem.
6. Injetor Lateral em Y com membrana auto-cicatrizante para administração de soluções em procedimento.
7. Tubo em PVC atóxico com 20 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
8. Protetor luer slip.
9. Conector Luer Slip conforme NBR ISO 594-1/2003 montagem cônica com conexidade de 6% (luer) para seringas e agulhas.
10. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rotulo

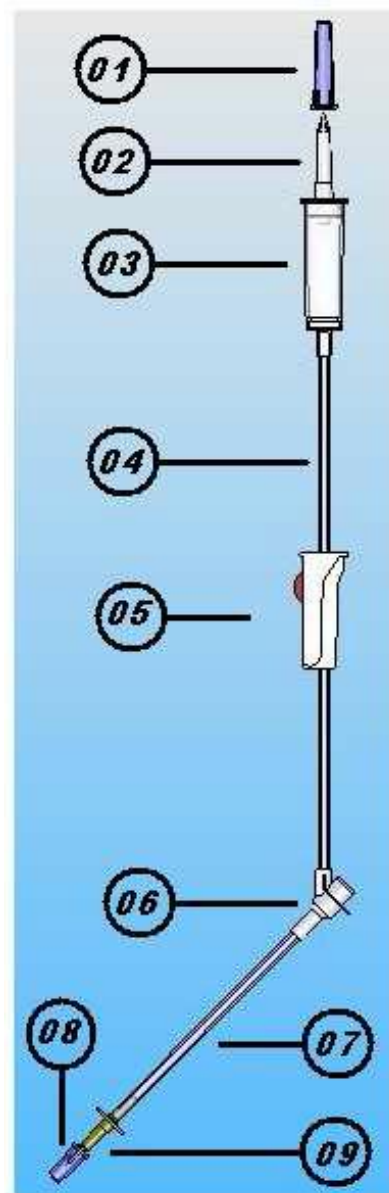

COD: 10312202 – EQUIPO MACRO FLEX. FILTRO PART. INJ. LAT, CONEC. LUER SLIP LOTE.OP: 00000 FAB/ESTERIL: 00/00/00 ANVISA Nº 80163570006	
--	--

EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

 PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº05	FICHA TÉCNICA FT 8.046	Emissão 02/2022	 PRODUTOS PARA SAÚDE
---	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2018	03	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
10/2019	04	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.
02/2022	05	Gessica Dias Correia	Atualização do selo NCC. Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Gessica Dias Correia”.