

**10322102 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PARTÍCULAS, CON.
LUER SLIP
ANVISA N°80163570006**

FINALIDADE:

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalp que se adaptem em conectores padrão de conicidade 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador com conector micro, confeccionado conforme NBR 8536-4:2011 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Conector micro para redução do tamanho da gota.
4. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada, com filtro particulado de 15 micras.
5. Tubo em PVC atóxico com 150 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
6. Pinça com rolete para a regulação do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulação.
7. Conector luer slip, conforme NBR ISO 594-1 e 2/2003 montagem cônica concidade de 6% (luer) para seringas e agulhas.
8. Tampa protetora para a conector luer slip.
9. FREE LÁTEX


ROTULAGEM: Modelo de Rotulo



COD: 10322102 – EQUIPO MICRO FLEX. FILTRO
PART. ,CON. LUER SLIP
LOTE.OP: 00000 FAB/ ESTERIL: 00/00/00
ANVISA Nº 80163570006



7 8 9 8 4 8 7 8 6 2 9 3 7

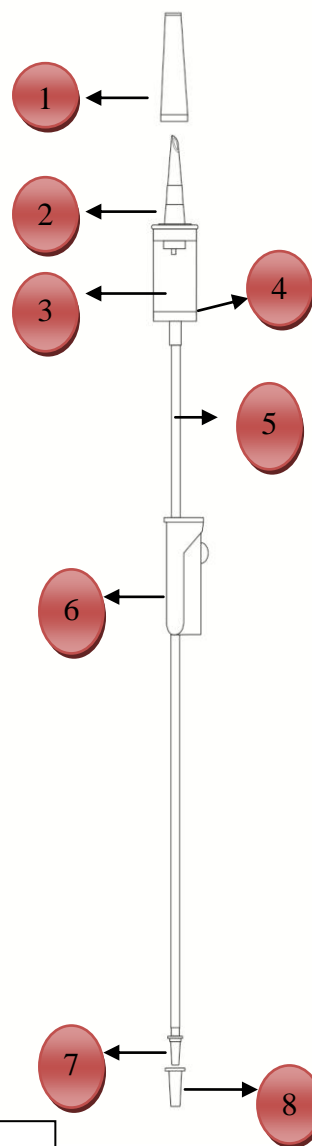

EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico para abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

3
Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2018	04	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
10/2019	05	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”. Atualização do selo NCC.
02/2022	06	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Gessica Dias Correia”.