

**MEDVIAS 2 VIAS
ANVISA Nº80163570041**

FINALIDADE:

Tem a finalidade de multiplicar o acesso venoso, à adaptação do equipo aos frascos de soluções parenterais de grande volume, seringas, scalp. Conicidade 6% conforme ABNT NBR ISO 594-1 e 594-2 de 2003.



COMPOSIÇÃO:

01. Protetor luer lock (tampa).
02. Conector Luer Lock.
03. Corta Fluxo.
04. Derivação em Y.
05. Tubo de PVC transparente com diâmetro interno de 2,60 mm ou neo nato com diâmetro interno 1,90 mm, com duas opções de comprimento: Tubo com 5 cm cada : totalizando aproximadamente 15 cm o produto completo. Tubo com 9 cm cada : totalizando aproximadamente 20 cm o produto completo.
06. Conector luer Slip.
07. Protetor do conector luer slip (tampa).
08. Protetor luer lock reservas (tampas) são opcionais, conforme solicitação do cliente.
09. Conector luer lock rotativo.
10. Protetor luer lock rotativo (tampa).
11. Conector luer lock Valvulado.
12. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rótulo



COD: 10340000 – EQUIPO MEDVIAS 2 VIAS CORTA FLUXO LOTE OP.: 00000 FAB/ESTÉRIL : 00/00 ANVISA Nº 80163570041	 7 898487 863224
COD: 10340010 – EQUIPO MEDVIAS 2 VIAS CORTA FLUXO E TAMPA RESERVA LOTE OP.: 00000 FAB/ESTÉRIL : 00/00 ANVISA Nº 80163570041	 7 898487 863231
COD: 10340012 – EQUIPO MEDVIAS 2 VIAS NEO NATO CORTA FLUXO E TAMPA RESERVA LOTE OP.: 00000 FAB/ESTÉRIL : 00/00 ANVISA Nº 80163570041	 7 898487 863347
COD: 10340002 – EQUIPO MEDVIAS 2 VIAS NEO NATO LOTE OP.: 00000 FAB/ESTÉRIL : 00/00 ANVISA Nº 80163570041	 7 898487 863286
COD: 10330030 – EQUIPO MEDVIAS 2 VIAS 20 CM LOTE OP.: 00000 FAB/ESTÉRIL : 00/00 ANVISA Nº 80163570041	 7 898487 863262
COD: 10340007 – EQUIPO MEDVIAS 2 VIAS VALVULADO CORTA FLUXO NEO NATO LOTE OP.: 00000 FAB/ESTÉRIL : 00/00 ANVISA Nº 80163570041	 7 898487 864535
COD: 10330011 – EQUIPO MEDVIAS 2 VIAS VALVULADO CORTA FLUXO LUER LOCK ROTATIVO 20CM LOTE OP.: 00000 FAB/ESTÉRIL : 00/00 ANVISA Nº 80163570041	 7 898487 864528
COD: 10330010 – EQUIPO MEDVIAS 2 VIAS CORTA FLUXO LUER LOCK ROTATIVO 20CM LOTE OP.: 00000 FAB/ESTÉRIL : 00/00 ANVISA Nº 80163570041	 7898487863354

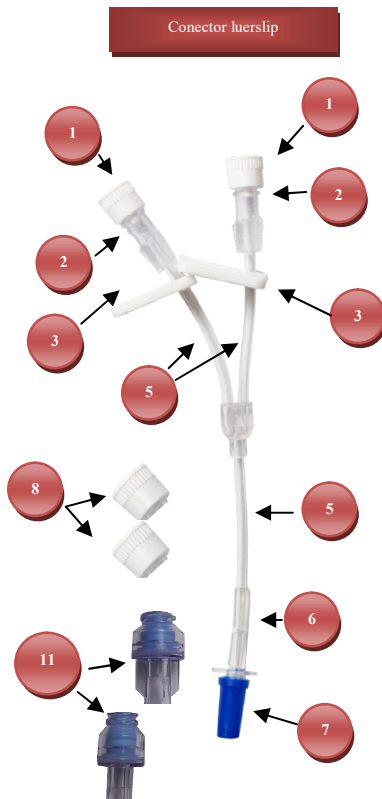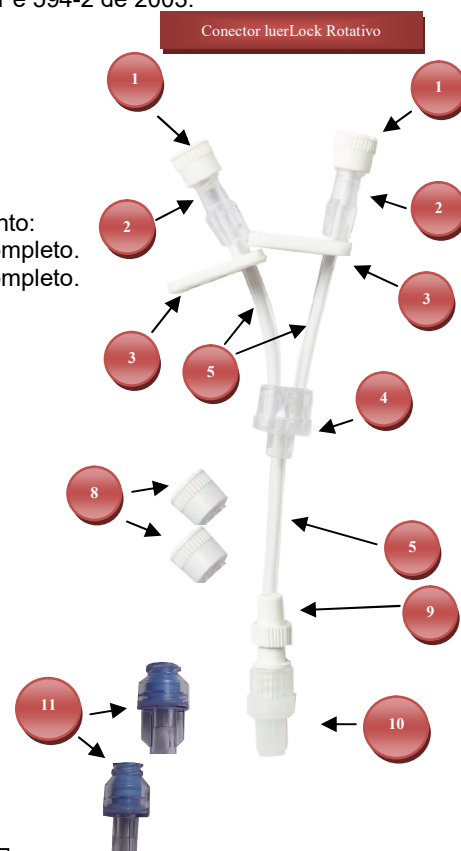

MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº09	FICHA TÉCNICA FT 8.039	Emissão 02/2025	MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE
--	-------------------------------	---	----------------------------------	--

COD. 10340013 EQUIPO MEDVIAS 2 VIAS
CORTA FLUXO TAMPA RESERVA LUER
LOCK ROTATIVO
LOTE OP: FAB./ESTÉRIL /
ANVISA Nº 80163570041



EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2020	07	Milena C. Rivera	Inclusão do código 10340013
02/2022	08	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".
02/2025	09	RozildaR. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Gessica Dias Correia" para "RozildaR. Oliveira" e Atualização da Foto.