


**MEDVIAS 4 VIAS  
ANVISA Nº80163570041**

**FINALIDADE:**

Tem a finalidade de multiplicar o acesso venoso, à adaptação do equipo aos frascos de soluções parenterais de grande volume, seringas, scalp. Conicidade 6% conforme ABNT NBR ISO 594-1 e 594-2 de 2003.

**COMPOSIÇÃO:**

1. Protetor luer lock - confeccionado em PVC com rosca dupla.
2. Conector Luer Lock - permite conexão nos dispositivos de infusão. Conforme Norma NBR ISO 594, parte I e II de 2003.
3. Tubo de PVC cristal - atóxico. Comprimento 5 cm cada, com diâmetro interno 2,60 mm e neo natos com 1,90 mm.
4. Corta-fluxo - destinado à interrupção de fluxo quando acionado, cores foram adicionadas a cada via a fim de sinalizar cada via utilizada (vermelho, azul, branco e verde).
5. Conector em Y (derivação) confeccionado em polímero resistente, que permite conexão segura dos tubos.
6. Conector Luer Slip - confeccionado em PVC atóxico com conicidade luer 6% conforme Norma NBR ISO 594 - parte I e II de 2003.
7. Protetor para conector Luer Slip (tampa) confeccionado em PVC.
8. Protetores luer lock reserva (opcional), para possível utilização durante os procedimentos.
9. Conector luer rotativo, permite melhor conexão, sem desconectar ao movimento do paciente.
10. Conector luer lock Valvulado).
11. FREE LÁTEX

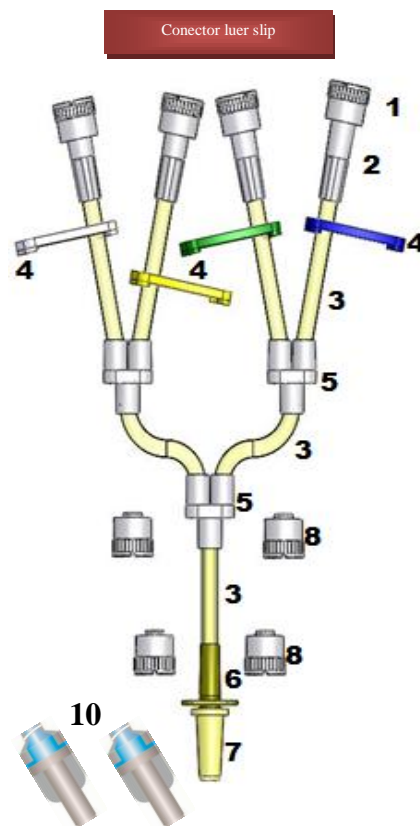

**ROTULAGEM: Modelo de Rótulo**



**COD: 10360012 – EQUIPO MEDVIAS 4 VIAS NEO  
NATO CORTA FLUXO TAMPAS RESERVA  
LOTE.OP: 00000 FAB/ESTÉRIL: 00/00/00  
ANVISA Nº 80163570041**



**COD: 10360000 – EQUIPO MEDVIAS 4 VIAS  
CORTA FLUXO  
LOTE.OP: 00000 FAB/ESTÉRIL: 00/00/00  
ANVISA Nº 80163570041**




**COD: 10360010 – EQUIPO MEDVIAS 4 VIAS  
CORTA FLUXO E TAMPAS RESERVA  
LOTE.OP: 00000 FAB/ESTÉRIL: 00/00/00  
ANVISA Nº 80163570041**



**COD: 10360013 – EQUIPO MEDVIAS 4 VIAS  
CORTA FLUXO TAMPAS RESERVA LUER ROT.  
LOTE.OP: 00000 FAB/ESTÉRIL: 00/00/00  
ANVISA Nº 80163570041**



**COD: 10340019 – EQUIPO MEDVIAS 4 VIAS  
VALVULADO CORTA FLUXO LUER LOCK ROT.  
LOTE.OP: 00000 FAB/ESTÉRIL: 00/00/00  
ANVISA Nº 80163570041**

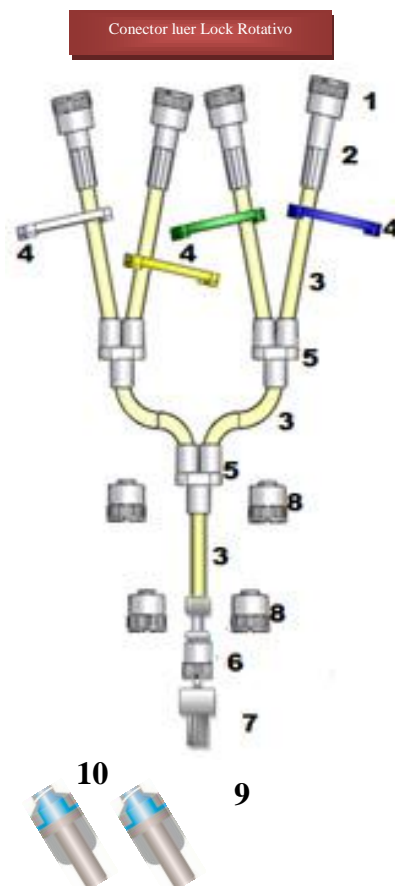



**Revisão  
Nº05**

**FICHA TÉCNICA  
FT 8.040**

**Emissão  
02/2022**



**EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

**ESTERILIZAÇÃO:**

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

**VALIDADE:**

Validade 4 anos.

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:**

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	03	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
09/2020	04	Milena Costa Rivera	Alteração do diâmetro interno do tubo neo nato de 1,60 mm para 1,90 mm. Inclusão do conector luer lock valvulado
02/2022	05	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".