

**EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL
ANVISA N°80163570026****FINALIDADE:**


Usado para administrar alimentos líquidos ou semi-líquidos até o estômago ou intestino delgado do paciente.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR ISO 8536-4:2011 adaptável em bolsa e frascos de soluções a serem administradas.
3. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada.
4. Tubo de PVC, 120, 150 e 200 cm de comprimento com diâmetro interno de 3,20 mm. Pinça tipo rolete de fácil regulagem do fluxo de gotejamento, com rolete com estrias para atrito para auxílio na regulagem.
5. Pinça tipo rolete de fácil regulagem do fluxo de gotejamento, com rolete com estrias para atrito para auxílio na regulagem.
6. Conector slip com conexidade de 6% (luer) para seringas, agulhas e sonda de alimentação.
7. Tampa protetora para o conector.
8. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rótulo

CÓD 10312401 EQUIPO MACRO FLEX. NUTRIÇÃO ENTERAL 120CM LOTE OP: 00000 FAB/ESTERIL 00/00 ANVISA N° 80163570026	 7 898487 863064
CÓD 10312402 EQUIPO MACRO FLEX. NUTRIÇÃO ENTERAL 150CM LOTE OP: 00000 FAB/ESTERIL 00/00 ANVISA N° 80163570026	 7 898487 863071
CÓD 10312411 EQUIPO MACRO FLEX. NUTRIÇÃO ENTERAL 200CM LOTE OP: 00000 FAB/ESTERIL 00/00 ANVISA N° 80163570026	 7 898487 863323

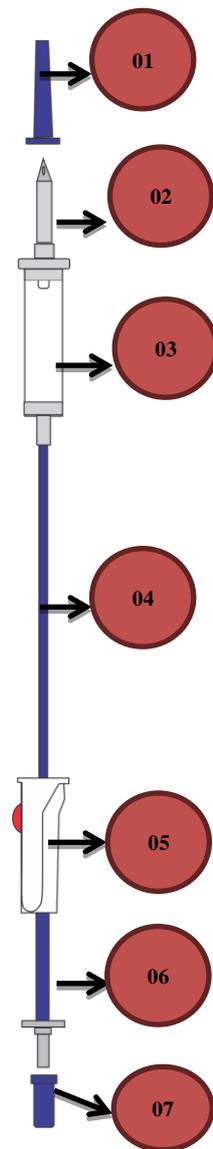



Revisão
N°06

FICHA TÉCNICA
FT 8.017

Emissão
02/2022



EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Óxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	04	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
11/2020	05	Milena Costa Rivera	Inclusão do código 10312402 e 10312411 Alteração da palavra "luz interna" para "diâmetro interno" Alteração do diâmetro interno de "2,90 mm" para "3,20 mm".
02/2022	06	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".