

**BOLSA PARA DRENAGEM DE URINA SISTEMA FECHADO PERNA
ANVISA N°80163579008****FINALIDADE:**


Usado como coletor de urina em pacientes que se encontraram nos hospitais, clínicas ou casas com uso de sonda uretral permanente ou temporária.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora.
2. Conector universal para conectar o sistema a sonda de alívio, demora ou sistema de incontinência urinária.
3. Tubo de extensor em PVC atóxico com 35 cm de comprimento com luz interna superior a 5 mm.
4. Alça tipo cinto regulável ao paciente, com sua parte interna em algodão aveludado para proteção do paciente.
5. Fivela metálica de alta resistência para perfeita adaptação ao cinto regulável.
6. Bolsa coletora confeccionada de material resistente translúcido atóxico, com capacidade de 750 ml, escala volumétrica em alto relevo.
7. Coldre de Proteção para o tubo de drenagem, evitando o risco de contaminação do sistema de coleta.
8. Pinça clamp confeccionada em material resistente, utilizada para drenagem do sistema de coleta, evitando o risco de contaminação junto ao usuário e profissional de saúde.
9. Tubo de drenagem confeccionado em PVC atóxico com 10 cm, com luz interna superior a 5mm, possibilitando um esvaziamento completo do sistema de coleta.
10. **FREE LÁTEX**

EMBALAGEM:

MEDSONDA
PRODUTOS PARA SAÚDE
DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, APIROGÊNICO,
USAR CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA, DESTRUIR APÓS O USO,
PRODUTO DE USO ÚNICO.
PROIBIDO REPROCESSAR
CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE USO PARA OBTER INFORMAÇÕES
SOBRE ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES.
WWW.MEDSONDA.COM.BR OU SOLICITE PELO
SAC TEL: (43) 3512 2800 OU E-MAIL: SAC@MEDSONDA.COM.BR
RESPONSÁVEL TÉCNICO
REGIANE GAVLAK CRO/PR 09201294
VALIDADE: 4 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO
ADVERTÊNCIAS
UTILIZAR APENAS SE A EMBALAGEM
ESTIVER ÍNTEGRA E NO PRAZO DE
VALIDADE.
CONTÉM 1 (UMA) UNIDADE
FABRICANTE/DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO: MEDSONDA IND. E COM DE PROD.
HOSPITALARES DESC. LTDA
AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, 1191 - DIST. IND. | CNPJ: 05.150.338/0001-43
ARAPOTI-PR | CEP: 84990-000 | FONE: (43) 3512 2800 | E-MAIL: MEDSONDA@MEDSONDA.COM.BR
INDÚSTRIA BRASILEIRA

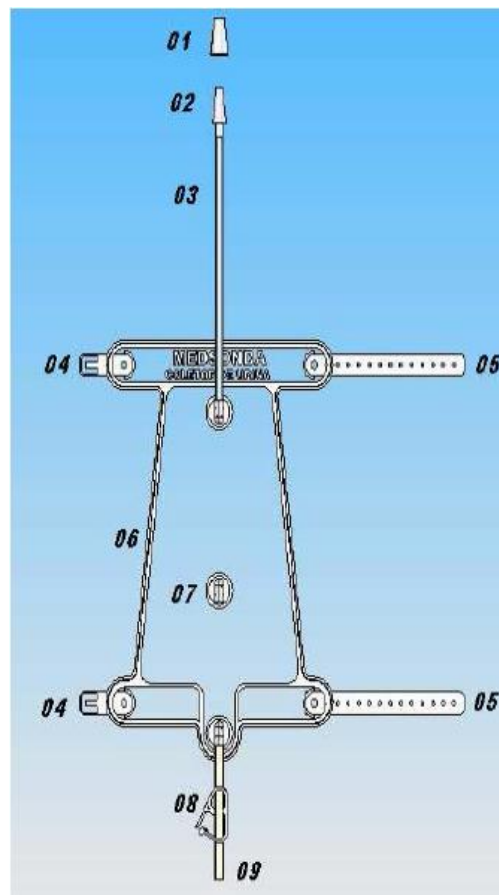

Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:

Código ;

Descrição do produto;

Lote;

Data de fabricação.

Cadastro ANVISA;

Instrução de Uso e Revisão;

Código de barras.

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

	Revisão Nº02	FICHA TÉCNICA FT 8.084	Emissão 09/2025	
--	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---

Data	Revisão	Responsável	Alterações
06/2023	00	Rozilda R. de Oliveira	Elaboração
04/2025	01	Rozilda R. de Oliveira	Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.
09/2025	02	Rozilda R. Oliveira	Atualização.