

Revisão N°05

FICHA TÉCNICA FT 8.012

Emissão 04/2025



COLETOR PARA DRENAGEM DE URINA SISTEMA FECHADO CLASSIC c/ PASTEUR ANVISA N°80163570014

FINALIDADE:

Usado como coletor de urina em pacientes que se encontraram nos leitos dos hospitais, clinicas ou casas com uso de sonda uretral permanente ou temporária.

COMPOSIÇÃO:

- 1. Tampa protetora.
- 2. Conector universal para conectar o sistema a sonda de alivio, demora ou sistema de incontinência urinária.
- 3. Ponto de coleta auto cicatrizante para coletar amostras da diurese.
- 4. Pinça corta fluxo, para procedimento de instalação do sistema e treinamento da bexiga.
- 5. Tubo de extensor em PVC atóxico com 100 cm de comprimento com luz interna superior a 5 mm.
- 6. Alça tipo óculos confeccionado em material resistente, adaptável aos leitos hospitalares e meios delocomoção.
- 7. Local para identificação dos dados do paciente.
- 8. Escala milimétrica para procedimento de diurese horária
- Tubo de drenagem confeccionado em PVC atóxico com 10 cm, com luz interna superior a 5 mm, pinça corta fluxo em polietileno com trava.
- Bolsa confeccionada em Policloreto de vinila atóxico, capacidade de 2000 ml, curva de PVC superior com válvula anti refluxo.
- 11. Tampa protetora.
- 12. Câmara de Pasteur: a entrada da urina na bolsa coletora ocorre por gotejamento, desta forma evita ocorrência de infecções.

13. FREE LÁTEX

EMBALAGEM:



Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:

Código;

Descrição do produto;

Lote;

Data de fabricação.

Cadastro ANVISA;

Instrução de Uso e Revisão;

Código de barras.


Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

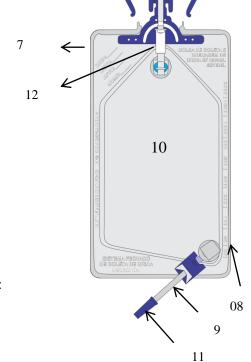

6



Revisão N°05

FICHA TÉCNICA FT 8.012

Emissão 04/2025



CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

CONTROLL DIO NETERNIGOLO.			
Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	03	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".
04/2025	05	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade "Gessica Dias Correia" para "Rozilda R. Oliveira". Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.