

**BOLSA PARA DRENAGEM DE URINA SISTEMA FECHADO PONTO DE COLETA CAMARA
PASTEUR 2.000ML CLASSIC I
ANVISA N°80163570014****FINALIDADE:**

Usado como coletor de urina em pacientes que se encontraram nos leitos dos hospitais, clínicas ou casas com uso de sonda uretral permanente ou temporária.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora.
2. Conector universal para conectar o sistema a sonda de alívio, demora ou sistema de incontinência urinária.
3. Ponto de coleta auto cicatrizante para coletar amostras da diurese.
4. Pinça corta fluxo, para procedimento de instalação do sistema e treinamento da bexiga.
5. Tubo de extensor em PVC atóxico com 90 cm e 130 cm de comprimento .
6. Alça tipo óculos confeccionado em material resistente, adaptável aos leitos hospitalares e meios delocomoção.
7. Local para identificação dos dados do paciente.
8. Escala milimétrica para procedimento de diurese horária
9. Tubo de drenagem confeccionado em PVC atóxico com 10 cm pinça corta fluxo em polietileno com trava.
10. Bolsa confeccionada em Policloreto de vinila atóxico, capacidade de 2000 ml, curva de PVC superior com válvula anti refluxo.
11. Tampa protetora.
12. Câmara de Pasteur
13. **FREE LÁTEX**

EMBALAGEM:

Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:

Código ;

Descrição do produto;

Lote;

Data de fabricação.

Cadastro ANVISA;

Instrução de Uso e Revisão;

Código de barras.


Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

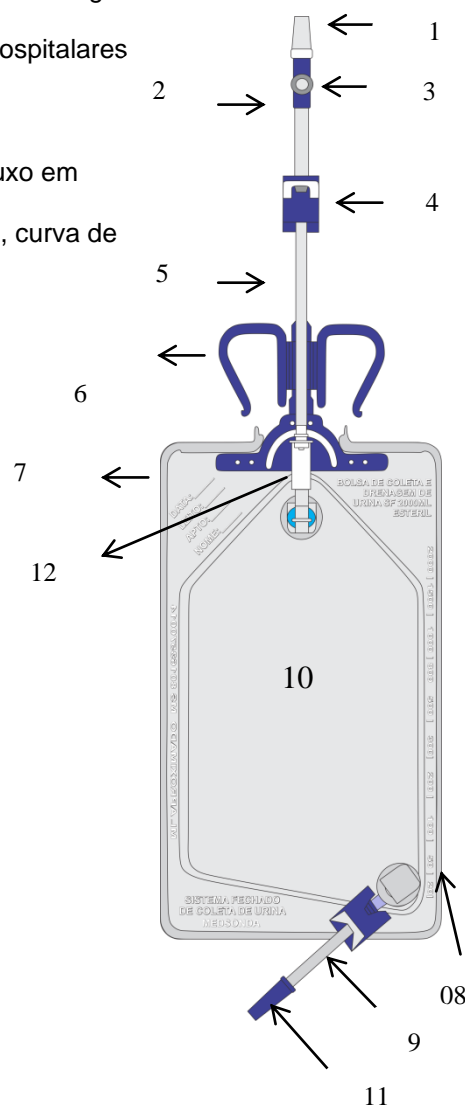

 PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº05	FICHA TÉCNICA FT 8.012	Emissão 04/2025	 PRODUTOS PARA SAÚDE
--	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Gessica Dias Correia”.
04/2025	05	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade “Gessica Dias Correia” para “Rozilda R. Oliveira”. Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.
12/2025	06	Rozilda R. Oliveira	Inclusão do modelo 130cm.