

BOLSA PARA DRENAGEM DE URINA SISTEMA FECHADO STANDARD
ANVISA Nº80163570014**FINALIDADE:**

Usado como coletor de urina em pacientes que se encontraram nos leitos dos hospitais, clinicas ou casas com uso de sonda uretral permanente ou temporária.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora.
2. Conector universal para conectar o sistema a sonda de alívio, demora ou sistema de incontinência urinária.
3. Ponto de coleta auto cicatrizante para coletar amostras da diurese.
4. Pinça corta fluxo, para procedimento de instalação do sistema e treinamento da bexiga.
5. Tubo de extensor em PVC atóxico com 90 e 130 cm de comprimento.
6. Alça tipo óculos confeccionado em material resistente, adaptável aos leitos hospitalares e meios de locomoção.
7. Local para identificação dos dados do paciente.
8. Escala milimétrica para procedimento de diurese horária
9. Tubo de drenagem confeccionado em PVC atóxico com 10 cm, pinça corta fluxo em polietileno com trava.
10. Bolsa confeccionada em Policloreto de vinila atóxico, capacidade de 1000 ml e 2.000 ml, curva de PVC superior com válvula anti refluxo.
11. Tampa protetora
12. **FREE LÁTEX**

EMBALAGEM:

Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:

Código ;

Descrição do produto;

Lote;

Data de fabricação.

Cadastro ANVISA;

Instrução de Uso e Revisão;

Código de barras.


Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

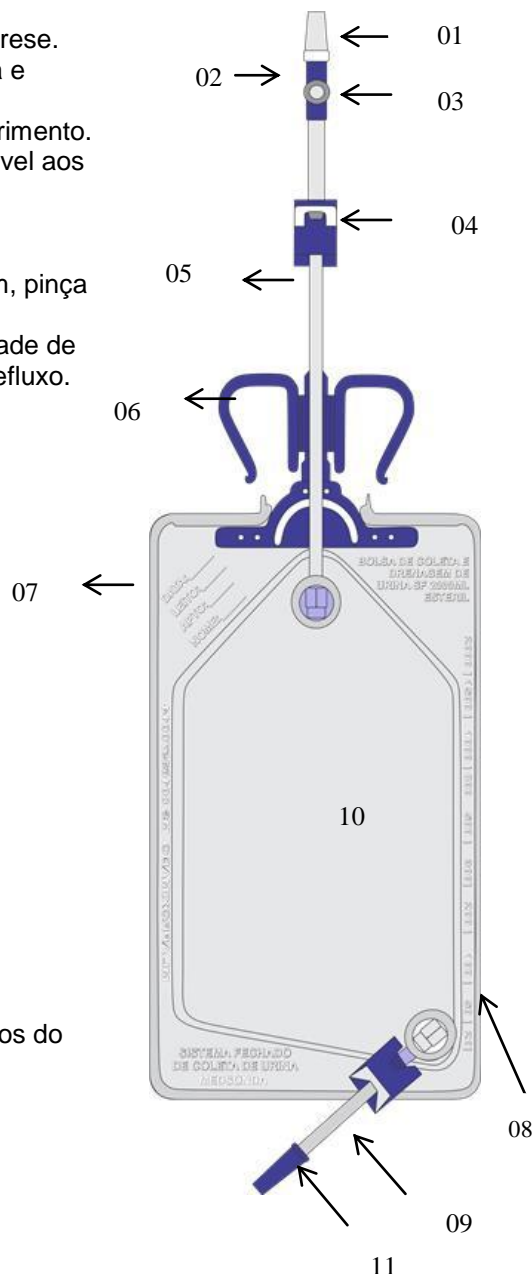

	Revisão N°09	FICHA TÉCNICA FT 8.011	Emissão 12/2025	
--	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
04/2025	07	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade “Gessica Dias Correia” para “Rozilda R. Oliveira”. Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.
09/2025	08	Rozilda R. Oliveira	Alteração no texto no item 10.
12/2025	09	Rozilda R. Oliveira	Inclusão do modelo com 130 cm.