

Revisão N°03

FICHA TÉCNICA FT 8.067

Emissão 02/2022



10318002 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PARTÍCULAS, ENTR.AR, INJETOR LATERAL VALVULADO E CON. LUER ROTATIVO ANVISA N°80163570006

FINALIDADE:

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalps que se adaptem em conectores de conicidade 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.

COMPOSIÇÃO:

- 1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
- 2. Perfurador confeccionado conforme NBR 8536-4:2011 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
- 3. Entrada de ar com filtro hidrofóbico.
- 4. Conector micro para redução do tamanho da gota.
- 5. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada.
- 6. Filtro particulado de 15 micras.
- 7. Tubo em PVC atóxico com 130 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
- 8. Pinça com rolete para a regulagem do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulagem.
- 9. Injetor lateral valvulado, com membrana auto-vedante para administração de soluções durante procedimento.
- 10. Tubo em PVC atóxico com 20 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
- 11. Conector luer lock rotativo, conforme NBR ISO 594-1 e 2/2003, montagem cônica com conicidade de 6% (luer) para seringas e agulhas.
- 12. Tampa protetora para a conector luer rotativo.
- 13. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rotulo



COD: 10318002 – EQUIPO MICRO .FLEX, INF. GRAV FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER ROT. LOTE.OP: 00000 FAB/ESTÉRIL: 00/00/00 ANVISA N° 80163570006



EMBALAGEM:


Embalado individualmente em papel grau cirúrgico para abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

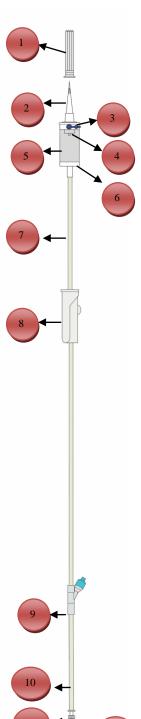

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:



Revisão N°03

FICHA TÉCNICA FT 8.067

Emissão 02/2022



Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2018	01	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
08/2019	02	Milena C. Rivera	Item 9. Alteração da palavra auto-cicatrizante para auto-vedante.
02/2022	03	Gessica Dias Correia	Atualização do selo NCC. Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".