

**SISTEMA ABERTO PARA COLETA DE SECREÇÕES GÁSTRICAS E URINA (TIPO BOLSA)
ANVISA Nº80163570047**

FINALIDADE:

Sistema de coleta de urina indicada para coleta de urina e secreções gástricas durante uma sondagem uretral ou uma lavagem gástrica respectivamente.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora.
2. Conector universal para conectar o sistema a sonda de alívio, demora ou sistema de incontinência urinária.
3. Pinça corta fluxo, para procedimento de instalação do sistema e treinamento da bexiga.
4. Tubo de extensor em PVC atóxico com 100 cm de comprimento com luz interna superior a 5 mm.
5. Alça tipo óculos confeccionado em material resistente, adaptável aos leitos hospitalares e meios de locomoção.
6. Bolsa de coletora confeccionada me matéria resistente translúcido atóxico, com capacidade de 1500 ml, escala volumétrica em alto relevo.
7. Coldre de Proteção para o tubo de drenagem, evitando o risco de contaminação do sistema de coleta.
8. Pinça rolete confeccionada em material resistente, utilizada para drenagem do sistema de coleta, evitando o risco de contaminação junto ao usuário e profissional de saúde.
9. Tubo de drenagem confeccionado em PVC atóxico com 10 cm, com luz interna superior a 5mm, possibilitando um esvaziamento completo do sistema de coleta.
10. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rotulo



EMBALAGEM:


Embalado individualmente em embalagem plástico.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto não estéril.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

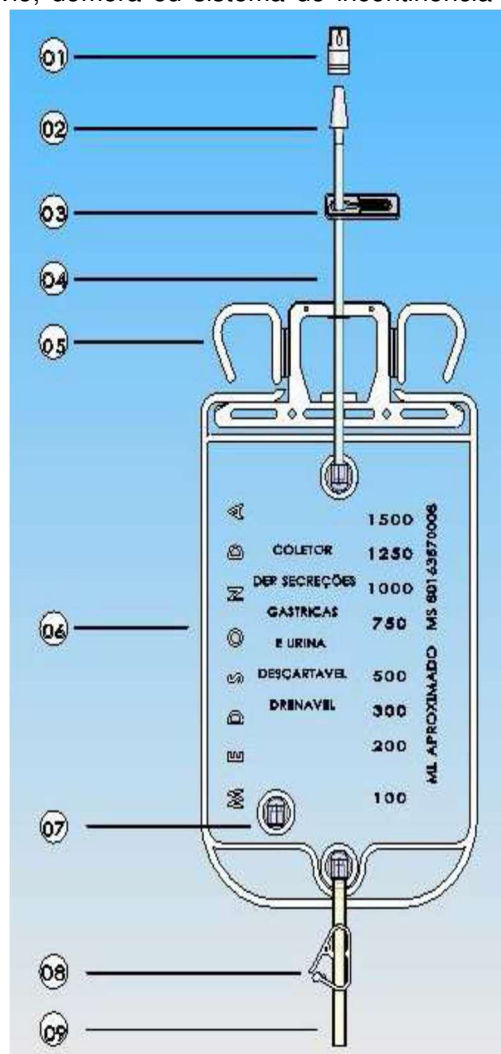

	Revisão Nº03	FICHA TÉCNICA FT 8.008	Emissão 02/2022	
--	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2018	01	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex, alteração do número do registro e validade.
10/2019	02	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.
02/2022	03	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Gessica Dias Correia”.