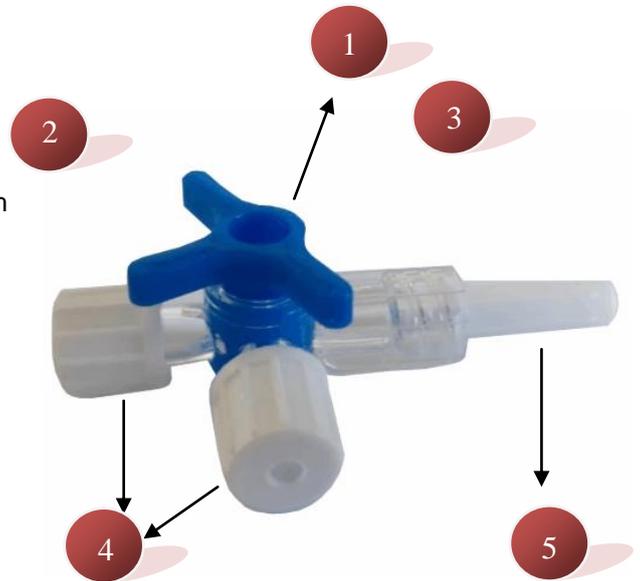


**TORNEIRA 3 VIAS**  
ANVISA N°80163579005**FINALIDADE:**

A torneira 3 vias é um dispositivo para conectar e regular a direção do fluxo de soluções intravenosas de três linhas distintas, duas linhas de infusão (equipo, extensor) e uma de acesso venoso (scalp, cateter) com conexão macho.

**COMPOSIÇÃO:**

- 1.Válvula (parte interna) fabricado em Polipropileno.
- 2.Corpo (parte externa) fabricado em Policarbonato.
- 3.Conector luerlock rotativo
- 4.Conector luerlock macho
- 5.Tampa

**ROTULAGEM:** Modelo de Rótulo

**CÓD:** 17003301 - TORNEIRA 3 VIAS  
**LOTE.OP:**00000 **FAB/ESTERIL.** 00/00/00  
**ANVISA N°** 80163579005



7898487862654

**EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

**ESTERILIZAÇÃO:**

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

**VALIDADE:**

Validade 4 anos.

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:**

Data	Revisão	Responsável	Alterações
04/2020	00	Milena Costa Rivera	Elaboração
02/2022	01	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".