

EQUIPO VETERINÁRIO

Dispensado de registro na ANVISA conforme Decreto 5053 MAPA.

FINALIDADE:

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalpels que se adaptem em conectores de conicidade 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador chanfrado, adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada.
4. Tubo em PVC atóxico com 120 ou 150 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
5. Pinça tipo rolete para a regulação do fluxo do gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulação.
6. Porta agulha tipo luer conforme NBR ISO 594-1 e 2 de 2003 , montagem cônica com conicidade de 6% (luer) para seringas e agulhas.
7. Tampa protetora para a porta agulha.
8. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rótulo

COD: 10401120 – EQUIPO VETERINÁRIO 120CM
LOTE.OP: 00000 ESTERIL/FAB: 00/00/00
ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA CONF DECRETO

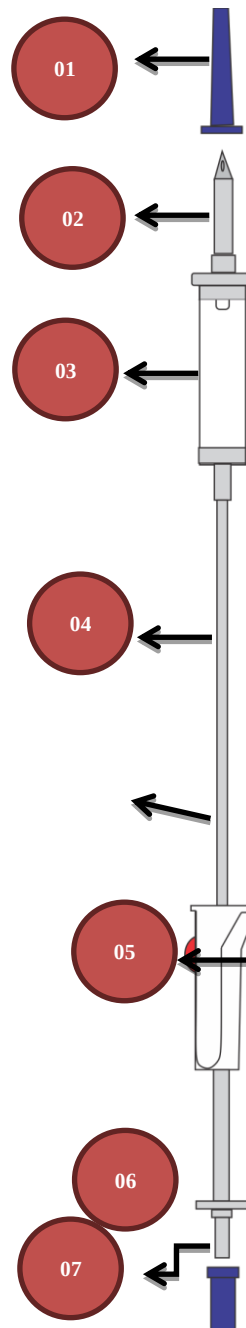


7 898487 864108

COD: 10401150 – EQUIPO VETERINÁRIO 150CM
LOTE.OP: 00000 ESTERIL/FAB: 00/00/00
ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA CONF DECRETO
5053 - MAPA



7 898487 864115

**EMBALAGEM**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com pétala para abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO

Medsonda Indústria e Comércio de produtos Hospitalares Descartáveis Ltda.
Av. Thereza de Souza Carneiro, 1191 Distrito Industrial - Arapoti – PR CEP:
84.990-000.

Fone:(43)3512-2800 email: sac@medsonda.com.br

	Revisão Nº03	FICHA TÉCNICA FT 8.064	Emissão: 02/2022	
--	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
03/2017	00	Joelma C. Brizola	Elaboração
08/2018	01	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
10/2019	02	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.
02/2022	03	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Gessica Dias Correia”.