

Revisão N°03

FICHA TÉCNICA FT 8.066

Emissão 02/2022



10317022 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PART. ENT. AR , INJ. LAT. VALVULADO E CONECTOR LUER SLIP ANVISA N°80163570006

FINALIDADE:

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalps que se adaptem em conectores padrão 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.

COMPOSIÇÃO:

- 1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
- Perfurador confeccionado conforme NBR 8536-4:2011 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
- 3. Filtro de ar hidrofóbico.
- 4. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada
- 5. Filtro particulado 15 micras.
- Tubo em PVC atóxico com 130 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
- 7. Pinça com rolete para a regulagem do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulagem.
- Injetor Lateral valvulado com membrana auto vedante para administração de soluções em procedimento.
- Tubo em PVC atóxico com 20 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
- 10. Conector luer slip conforme NBR ISO 594-1 e 2: 2003 montagem cônica com conexidade de 6% (luer) para seringas e agulhas.
- 11. Tampa protetora para conector luer slip.
- 12. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rotulo



COD: 10317022 – EQUIPO MACRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT VALV. E CON. LUER SLIP. LOTE.OP: 00000 FAB/ESTÉRIL: 00/00/00 ANVISA N° 80163570006



EMBALAGEM:


Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

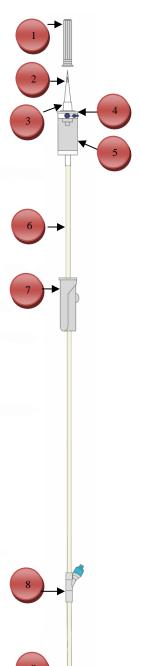



Revisão N°03

FICHA TÉCNICA FT 8.066

Emissão 02/2022



CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

	Data	Revisão	Responsável	Alterações
	08/2018	01	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
	08/2019	02	Milena C. Rivera	Item 8. Alteração da palavra auto cicatrizante para auto vedante.
	02/2022	03	Gessica Dias Correia	Atualização do selo NCC. Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".