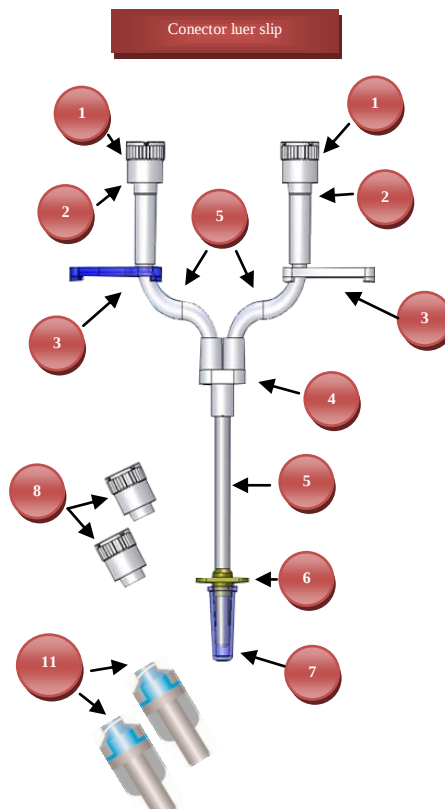
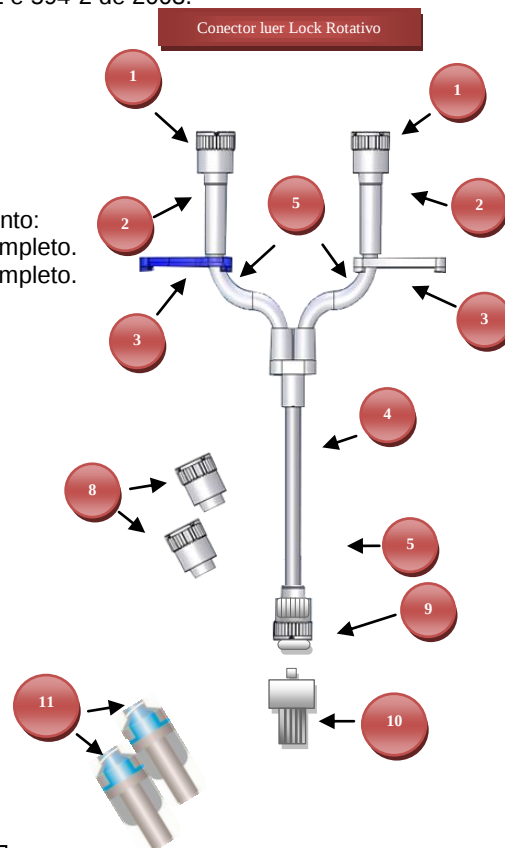


MEDVIAS 2 VIAS
ANVISA Nº80163570041
FINALIDADE:

Tem a finalidade de multiplicar o acesso venoso, à adaptação do equipo aos frascos de soluções parenterais de grande volume, seringas, scalp. Conicidade 6% conforme ABNT NBR ISO 594-1 e 594-2 de 2003.

COMPOSIÇÃO:

01. Protetor luer lock (tampa).
02. Conector Luer Lock.
03. Corta Fluxo.
04. Derivação em Y.
05. Tubo de PVC transparente com diâmetro interno de 2,60 mm ou neo nato com diâmetro interno 1,90 mm, com duas opções de comprimento: Tubo com 5 cm cada : totalizando aproximadamente 15 cm o produto completo. Tubo com 9 cm cada : totalizando aproximadamente 20 cm o produto completo.
06. Conector luer Slip.
07. Protetor do conector luer slip (tampa).
08. Protetor luer lock reservas (tampas) são opcionais, conforme solicitação do cliente.
09. Conector luer lock rotativo.
10. Protetor luer lock rotativo (tampa).
11. Conector luer lock Valvulado).
12. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rótulo


COD: 10340000 – EQUIPO MEDVIAS 2 VIAS CORTA FLUXO LOTE OP.: 00000 FAB/ESTÉRIL : 00/00 ANVISA Nº 80163570041	7 898487 863224
COD: 10340010 – EQUIPO MEDVIAS 2 VIAS CORTA FLUXO E TAMPAS RESERVA LOTE OP.: 00000 FAB/ESTÉRIL : 00/00 ANVISA Nº 80163570041	7 898487 863231
COD: 10340012 – EQUIPO MEDVIAS 2 VIAS NEO NATO CORTA FLUXO E TAMPAS RESERVA LOTE OP.: 00000 FAB/ESTÉRIL : 00/00 ANVISA Nº 80163570041	7 898487 863347
COD: 10340002 – EQUIPO MEDVIAS 2 VIAS NEO NATO LOTE OP.: 00000 FAB/ESTÉRIL : 00/00 ANVISA Nº 80163570041	7 898487 863286
COD: 10330030 – EQUIPO MEDVIAS 2 VIAS 20 CM LOTE OP.: 00000 FAB/ESTÉRIL : 00/00 ANVISA Nº 80163570041	7 898487 863262
COD: 10340007 – EQUIPO MEDVIAS 2 VIAS VALVULADO CORTA FLUXO NEO NATO LOTE OP.: 00000 FAB/ESTÉRIL : 00/00 ANVISA Nº 80163570041	7 898487 864535
COD: 10330011 – EQUIPO MEDVIAS 2 VIAS VALVULADO CORTA FLUXO LUER LOCK ROTATIVO 20CM LOTE OP.: 00000 FAB/ESTÉRIL : 00/00 ANVISA Nº 80163570041	7 898487 864528
COD: 10340013 – EQUIPO MEDVIAS 2 VIAS CORTA FLUXO TAMPAS RESERVA LUER LOCK ROTATIVO LOTE OP.: 00000 FAB/ESTÉRIL : 00/00 ANVISA Nº 80163570041	7 898487 864412

EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
02/2017	01	Joelma C. Brizola	Inclusão Tampas reservas e luz interna
12/2017	02	Joelma C. Brizola	Inclusão de medvias com 20 cm.
08/2018	03	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
06/2019	04	Milena C. Rivera	Inclusão do conector luer lock valvulado
06/2020	05	Milena C. Rivera	Item 05, alteração da palavra "luz interna" para "diâmetro interno".
09/2020	06	Milena C. Rivera	Alteração do diâmetro interno de 1,60 mm para 1,90 mm.
09/2020	07	Milena C. Rivera	Inclusão do código 10340013