


**MEDVIAS 4 VIAS**  
**ANVISA Nº80163570041**

**FINALIDADE:**

Tem a finalidade de multiplicar o acesso venoso, à adaptação do equipo aos frascos de soluções parenterais de grande volume, seringas, scalp. Conicidade 6% conforme ABNT NBR ISO 594-1 e 594-2 de 2003.

**COMPOSIÇÃO:**


1. Protetor luer lock - confeccionado em PVC com rosca dupla.
2. Conector Luer Lock - permite conexão nos dispositivos de infusão. Conforme Norma NBR ISO 594, parte I e II de 2003.
3. Tubo de PVC cristal - atóxico. Comprimento 5 cm cada, com diâmetro interno 2,60 mm e neo natos com 1,90 mm.
4. Corta-fluxo - destinado à interrupção de fluxo quando acionado, cores foram adicionadas a cada via a fim de sinalizar cada via utilizada (vermelho, azul, branco e verde).
5. Conector em Y (derivação) confeccionado em polímero resistente, que permite conexão segura dos tubos.
6. Conector Luer Slip - confeccionado em PVC atóxico com conicidade luer 6% conforme Norma NBR ISO 594 - parte I e II de 2003.
7. Protetor para conector Luer Slip (tampa) confeccionado em PVC.
8. Protetores luer lock reserva (opcional), para possível utilização durante os procedimentos.
9. Conector luer rotativo, permite melhor conexão, sem desconectar ao movimento do paciente.
10. Conector luer lock Valvulado).
11. FREE LÁTEX

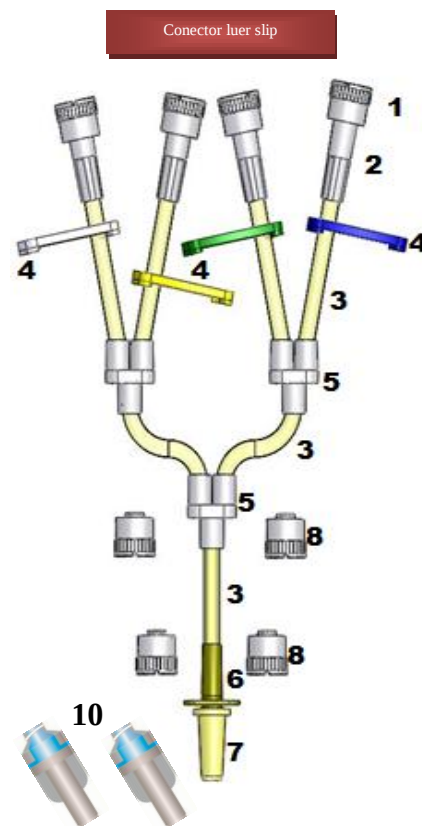

**ROTULAGEM: Modelo de Rótulo**



|                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COD: 10360012 – EQUIPO MEDVIAS 4 VIAS NEO NATO CORTA FLUXO TAMPAS RESERVA</b><br><b>LOTE.OP: 00000 FAB/ESTÉRIL: 00/00/00</b><br><b>ANVISA Nº 80163570041</b>  | <br>7 898487 863446 |
| <b>COD: 10360000 – EQUIPO MEDVIAS 4 VIAS CORTA FLUXO</b><br><b>LOTE.OP: 00000 FAB/ESTÉRIL: 00/00/00</b><br><b>ANVISA Nº 80163570041</b>                          | <br>7 898487 863248 |
| <b>COD: 10360010 – EQUIPO MEDVIAS 4 VIAS CORTA FLUXO E TAMPAS RESERVA</b><br><b>LOTE.OP: 00000 FAB/ESTÉRIL: 00/00/00</b><br><b>ANVISA Nº 80163570041</b>         | <br>7 898487 863255 |
| <b>COD: 10360013 – EQUIPO MEDVIAS 4 VIAS CORTA FLUXO TAMPAS RESERVA LUER ROT.</b><br><b>LOTE.OP: 00000 FAB/ESTÉRIL: 00/00/00</b><br><b>ANVISA Nº 80163570041</b> | <br>7 898487 864252 |
| <b>COD: 10340019 – EQUIPO MEDVIAS 4 VIAS VALVULADO CORTA FLUXO LUER LOCK ROT.</b><br><b>LOTE.OP: 00000 FAB/ESTÉRIL: 00/00/00</b><br><b>ANVISA Nº 80163570041</b> | <br>7 898487 862265 |

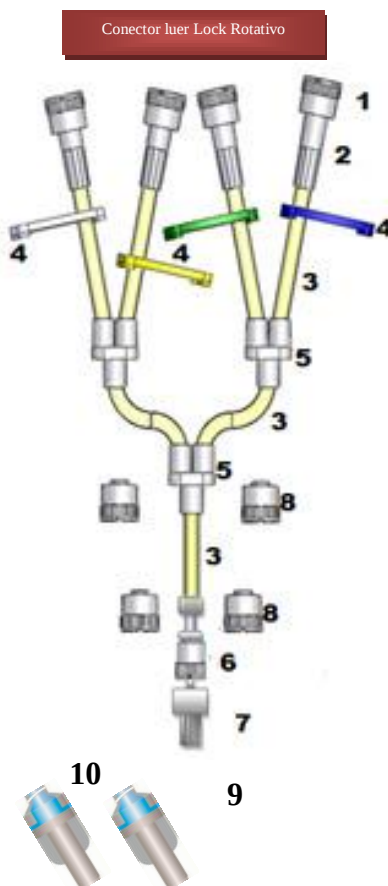

**EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

**ESTERILIZAÇÃO:**

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

**VALIDADE:**

Validade 4 anos.

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:**

| Data    | Revisão | Responsável         | Alterações                                                                                                          |
|---------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/2015 | 00      | Yurandy Dominguez   | Elaboração                                                                                                          |
| 03/2017 | 01      | Joelma C. Brizola   | Inclusão da Luz interna dos tubos e validade de 4 anos no rótulo                                                    |
| 08/2018 | 02      | Joelma C. Brizola   | Inclusão free látex                                                                                                 |
| 10/2019 | 03      | Milena Costa Rivera | Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.              |
| 09/2020 | 04      | Milena Costa Rivera | Alteração do diâmetro interno do tubo neo nato de 1,60 mm para 1,90 mm.<br>Inclusão do conector luer lock valvulado |