

EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL CONECTOR ESCALONADO
ANVISA Nº 80163570026**FINALIDADE:**

Usado para administrar alimentos líquidos ou semi-líquidos até o estômago ou intestino delgado do paciente.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR ISO 8536-4:2011 adaptável em bolsa e frascos de soluções a serem administradas.
3. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada.
4. Tubo de PVC, 120, 150 cm de comprimento com diâmetro interno de 3,20 mm.
5. Pinça tipo rolete para a regulação do fluxo de gotejamento, com rolete com estrias para atrito para auxílio na regulação.
6. Conector escalonado com conexidade de 6% (luer) para seringas, agulhas e sonda de alimentação.
7. Tampa protetora para o conector escalonado.
8. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rotulo

CÓD 10312422 EQUIPO MACRO FLEX.
NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO 120CM
LOTE OP: 00000 FAB/ESTERIL 00/00
ANVISA Nº 80163570026



CÓD 10312424 EQUIPO MACRO FLEX.
NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO 150CM
LOTE OP: 00000 FAB/ESTERIL 00/00
ANVISA Nº 80163570026

**EMBALAGEM:**


Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

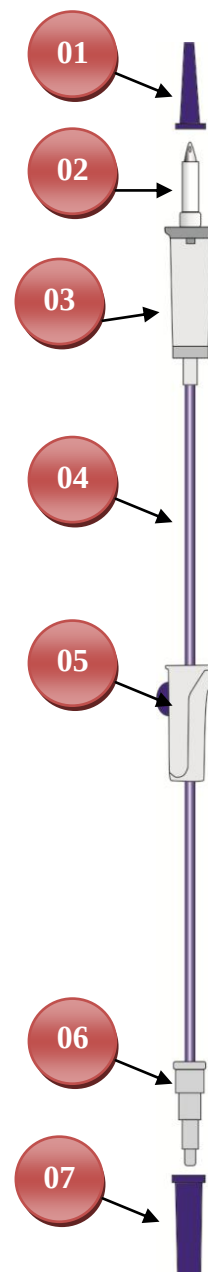

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
03/2017	01	Joelma C. Brizola	Rotulagem 4 anos
01/2018	02	Joelma C. Brizola	Inclusão do equipo de 200 cm
08/2018	03	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
10/2019	04	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.
11/2020	05	Milena Costa Rivera	Inclusão do código 10312424 Alteração da palavra “luz interna” para “diâmetro interno” Alteração do diâmetro interno de “2,90 mm” para “3,20 mm” Exclusão do equipo 200 cm.