

EQUIPO MACRO FLEXÍVEL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL
COM ENTRADA DE AR
ANVISA Nº 80163570026**FINALIDADE:**

Usado para administrar alimentos líquidos ou semi-líquidos até o estômago ou intestino delgado do paciente.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR ISO 8536-4:2011 adaptável em bolsa e frascos de soluções a serem administradas.
3. Filtro para entrada de ar, com membrana hidrofóbica
4. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada.
5. Tubo de PVC, 120, 150 e 200 cm de comprimento com diâmetro interno de 3,20 mm.
6. Pinça tipo rolete para a regulação do fluxo de gotejamento, com rolete com estrias para atrito para auxílio na regulação.
7. Conector slip com conexidade de 6% (luer) para seringas, agulhas e sonda de alimentação.
8. Tampa protetora para o conector.
9. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rótulo


CÓD 10313401 EQUIPO MACRO
FLEX. NUTRIÇÃO ENTERAL ENT. AR 120CM
LOTE OP: 00000 FAB/ESTERIL 00/00
ANVISA Nº 80163570026



CÓD 10313402 EQUIPO MACRO
FLEX. NUTRIÇÃO ENTERAL ENT. AR 150CM
LOTE OP: 00000 FAB/ESTERIL 00/00
ANVISA Nº 80163570026



CÓD 10311401 EQUIPO MACRO
FLEX. NUTRIÇÃO ENTERAL ENT. AR 200CM
LOTE OP: 00000 FAB/ESTERIL 00/00
ANVISA Nº 80163570026

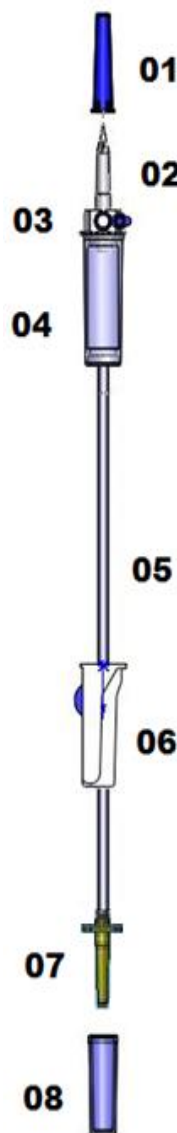

	Revisão 05	FICHA TÉCNICA FT 8.019	Emissão: 11/2020	
--	-------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---

EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
03/2017	01	Joelma C. Brizola	Rotulagem 4 anos
01/2018	02	Joelma C. Brizola	Inclusão do equipo de 200 cm
08/2018	03	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
10/2019	04	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
11/2020	05	Milena Costa Rivera	Inclusão do código 10313402 e 10311401 Alteração da palavra "luz interna" para "diâmetro interno" Alteração do diâmetro interno de "2,90 mm" para "3,20 mm".