

**COLETOR PARA DRENAGEM DE URINA SISTEMA FECHADO CLASSIC c/ PASTEUR
ANVISA N°80163570014**


FINALIDADE:

Usado como coletor de urina em pacientes que se encontraram nos leitos dos hospitais, clinicas ou casas com uso de sonda uretral permanente ou temporária.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora.
2. Conector universal para conectar o sistema a sonda de alívio, demora ou sistema de incontinência urinária.
3. Ponto de coleta auto cicatrizante para coletar amostras da diurese.
4. Pinça corta fluxo, para procedimento de instalação do sistema e treinamento da bexiga.
5. Tubo de extensor em PVC atóxico com 100 cm de comprimento com luz interna superior a 5 mm.
6. Alça tipo óculos confeccionado em material resistente, adaptável aos leitos hospitalares e meios de locomoção.
7. Local para identificação dos dados do paciente.
8. Escala milimétrica para procedimento de diurese horária.
9. Tubo de drenagem confeccionado em PVC atóxico com 10 cm, com luz interna superior a 5 mm, pinça corta fluxo em polietileno com trava.
10. Bolsa confeccionada em Policloreto de vinila atóxico, capacidade de 2000 ml, curva de PVC superior.
11. Válvula anti refluxo
12. Câmara de Pasteur: a entrada da urina na bolsa coletora ocorre por gotejamento, desta forma evita ocorrência de infecções.
13. FREE LÁTEX

ROTULAGEM:Modelo de Rotulo

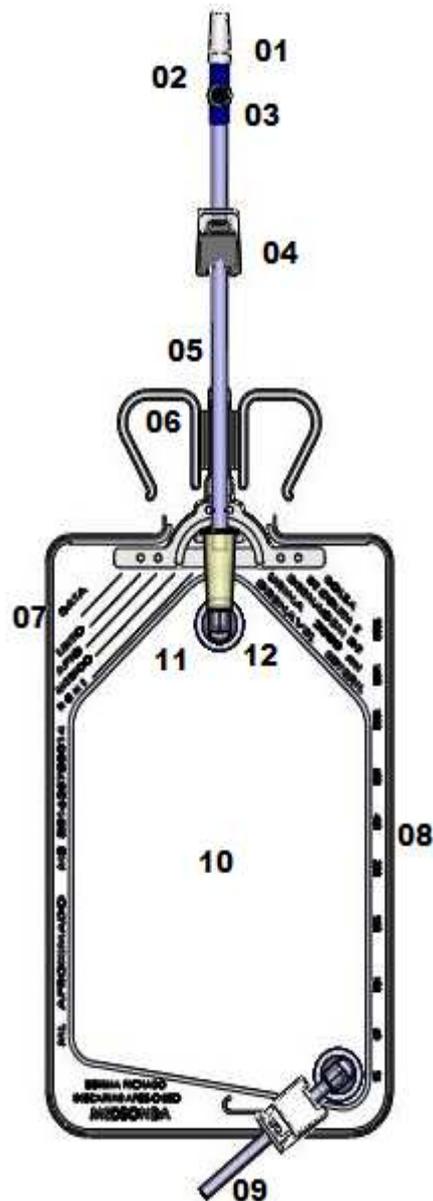

EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
03/2017	01	Joelma C. Brizola	Rotulagem 4 anos
08/2018	02	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex