

BOLSA PARA DRENAGEM DE URINA SISTEMA FECHADO STANDARD
ANVISA N°80163570014


FINALIDADE:

Usado como coletor de urina em pacientes que se encontraram nos leitos dos hospitais, clínicas ou casas com uso de sonda uretral permanente ou temporária.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora.
2. Conector universal para conectar o sistema a sonda de alívio, demora ou sistema de incontinência urinária.
3. Ponto de coleta auto cicatrizante para coletar amostras da diurese.
4. Pinça corta fluxo, para procedimento de instalação do sistema e treinamento da bexiga.
5. Tubo de extensor em PVC atóxico com 100 cm de comprimento com luz interna superior a 5 mm.
6. Alça tipo óculos confeccionado em material resistente, adaptável aos leitos hospitalares e meios de locomoção.
7. Local para identificação dos dados do paciente.
8. Escala milimétrica para procedimento de diurese horária.
9. Tubo de drenagem confeccionado em PVC atóxico com 10 cm, com luz interna superior a 5 mm, pinça corta fluxo em polietileno com trava.
10. Bolsa confeccionada em Policloreto de vinila atóxico, capacidade de 2000 ml, curva de PVC superior com válvula anti refluxo.
11. Tampa Dreno.
12. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rotulo

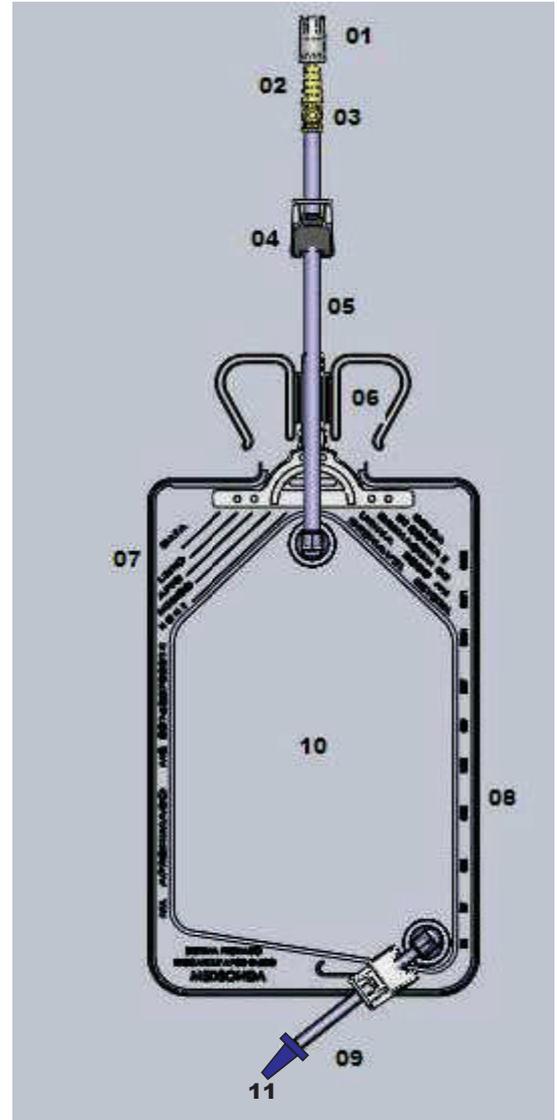

COD:11001111 - BOLSA DREN. UR. SIS. FECH.
CON. ANELADO 2.000ML STANDARD I

LOTE.OP: 00000 FAB/ ESTERIL: 00/00/00
ANVISA N° 80163570014



COD:11001011 - BOLSA DREN. UR. SIS. FECH.
PONTO COL. 2.000ML STANDARD I

LOTE.OP: 00000 FAB/ ESTERIL: 00/00/00
ANVISA N° 80163570014



COD:11001012 - BOLSA DREN. UR. SIS. FECH.
1.000ML STANDARD II

LOTE.OP: 00000 FAB/ ESTERIL: 00/00/00
ANVISA N° 80163570014





Revisão 03

FICHA TÉCNICA
FT 8.011

Emissão:
10/2018



EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
03/2017	01	Joelma C. Brizola	Rotulagem 4 anos
08/2018	02	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
10/2018	03	Ana Cristina G. de Almeida	Atualização de Rotulagem