

SISTEMA ABERTO PARA COLETA DE SECREÇÕES GÁSTRICAS E URINA (tipo garrafa)
ANVISA Nº80163570008


FINALIDADE:

Sistema de coleta de urina, indicada para coleta de urina e secreções gástricas durante uma sondagem uretral ou uma lavagem gástrica respectivamente.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora.
2. Conector universal para conectar o sistema a sonda de alívio, demora. O conector deste produto foi desenvolvido para receber em sua parte interna sonda de alívio e em sua parte externa sonda de demora, não sendo necessário uso de adaptações de látex.
3. Tubo de extensor em PVC atóxico com 100 cm de comprimento.
4. Alça de PVC resistente para fácil adaptação ao leito do paciente.
5. Pinça corta fluxo, para retenção da passagem de fluidos.
6. Conector em PVC para ser conectado ao frasco com facilidade e segurança. Possibilitando uma drenagem segura e rápida do frasco coletor.
7. Frasco translúcido atóxico, com capacidade de 1200 ml. Confeccionado em Polipropileno inodoro e resistente.
8. Escala volumétrica em alto relevo para medições da diurese.
9. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rótulo

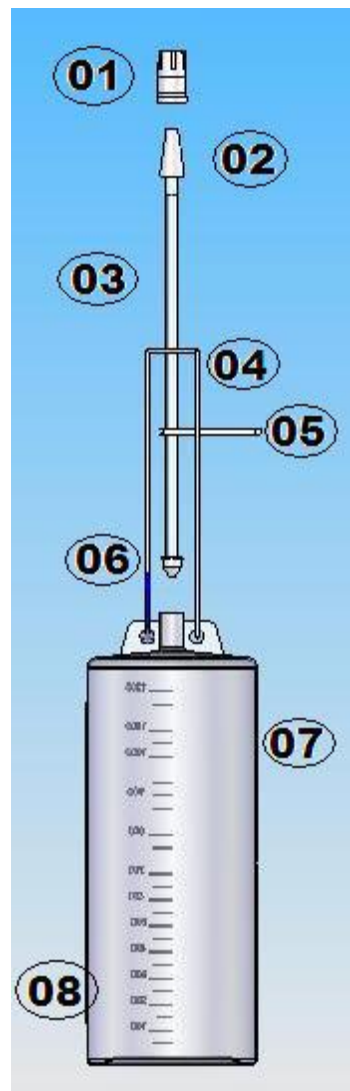

EMBALAGEM

Embalado individualmente em saco plástico.

ESTERILIZAÇÃO

Produto não estéril.

VALIDADE

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
08/2018	01	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
02/2019	02	Milena Costa Rivera	Exclusão do sistema de Incontinência urinária