


10318003 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PARTÍCULAS, ENTR.AR, INJETOR LATERAL VALVULADO E CON. LUER SLIP
ANVISA Nº80163570006

FINALIDADE:

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalp's que se adaptem em conectores de conicidade 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR 8536-4:2011 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Entrada de ar com filtro hidrofóbico.
4. Conector micro para redução do tamanho da gota.
5. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada
6. Filtro particulado de 15 micras.
7. Tubo em PVC atóxico com 130 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
8. Pinça com rolete para a regulação do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulação.
9. Injetor lateral formato em y, com membrana auto-cicatrizante para administração de soluções durante procedimento.
10. Tubo em PVC atóxico com 20 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
11. Conector luer slip conforme NBR ISO 594-1 e 2/2003, montagem cônica com conicidade de 6% (luer) para seringas e agulhas.
12. Tampa protetora para conector luer slip.
13. FREE LÁTEX

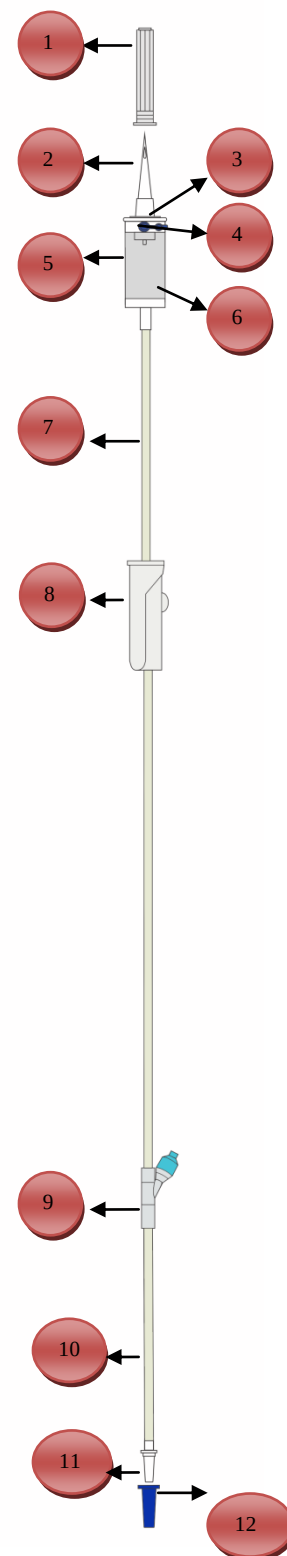

ROTULAGEM: Modelo de Rotulo



**COD: 10318003 – EQUIPO MICRO FLEX. INF. GRAV.
FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER SLIP.
LOTE.OP: 00000 FAB/ESTÉRIL: 00/00/00
ANVISA Nº 80163570006**



EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico para abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
04/2017	00	Joelma C. Brizola	Elaboração
08/2018	01	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex