

**EQUIPO VETERINÁRIO**

Dispensado de registro na ANVISA conforme Decreto 5053 MAPA.


**FINALIDADE:**

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalps que se adaptem em conectores de conicidade 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.

**COMPOSIÇÃO:**

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador chanfrado, adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada.
4. Tubo em PVC atóxico com 120 ou 150 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
5. Pinça tipo rolete para a regulação do fluxo do gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulação.
6. Item opcional para equipos de 150 cm = Injetor Lateral em Y com membrana auto-cicatrizante para administração de soluções em procedimento.
7. Tubo em PVC atóxico com 20 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
8. Tampa protetora para a porta agulha.
9. Porta agulha tipo luer conforme NBR ISO 594-1 e 2 de 2003 , montagem cônica com conicidade de 6% (luer) para seringas e agulhas.
10. FREE LÁTEX

**ROTULAGEM:** Modelo de Rótulo

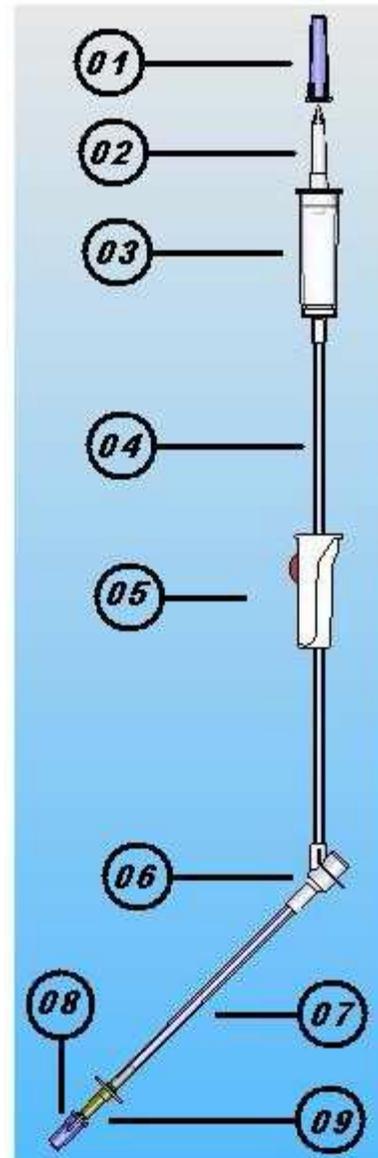

**COD: 10401120 – EQUIPO VETERINÁRIO 120CM**  
**LOTE.OP: 00000 ESTERIL/FAB: 00/00/00**  
**ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA CONF DECRETO**  
**5053 - MAPA**



**COD: 10401150 – EQUIPO VETERINÁRIO 150CM**  
**LOTE.OP: 00000 ESTERIL/FAB: 00/00/00**  
**ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA CONF DECRETO**  
**5053 - MAPA**





Revisão 02

**FICHA TÉCNICA**  
FT 8.064Emissão:  
10/2019

<b>COD: 10402120 – EQUIPO VETERINÁRIO</b> <b>INJETOR LATERAL 120CM</b> <b>LOTE.OP: 00000 ESTERIL/FAB: 00/00/00</b> <b>ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA CONF DECRETO</b> 5053 - MAPA	 7 898487 864122
<b>COD: 10402150 – EQUIPO VETERINÁRIO</b> <b>INJETOR LATERAL 120CM</b> <b>LOTE.OP: 00000 ESTERIL/FAB: 00/00/00</b> <b>ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA CONF DECRETO</b> 5053 - MAPA	 7 898487 864139

**EMBALAGEM**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com pétala para abertura asséptica.

**ESTERILIZAÇÃO**

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

**VALIDADE**

Validade 4 anos.

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:**

Data	Revisão	Responsável	Alterações
03/2017	00	Joelma C. Brizola	Elaboração
08/2018	01	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
10/2019	02	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.